

# 高圧蒸気滅菌器 オプション

## 金網カゴ


蒸気が入り込みやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。



適合型式	品番	内寸法(直径×高さ)	定価
TR-24S, TR-24LA/B, KTR-2322, KTR-2346A/B	BW2120	φ210×200mm	¥14,000 (税込 ¥15,400)
TR-24LA/B, KTR-2346A/B	BW2140	φ210×400mm	¥18,000 (税込 ¥19,800)
KTR-3045A/B, KTR-3065A/B, MCS-3032S, MCS-3032L, RK-3030	BW2720	φ270×200mm	¥18,000 (税込 ¥19,800)
	BW2730	φ270×300mm	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	BW2740	φ270×400mm	¥20,000 (税込 ¥22,000)
CLG-32L, CLG-32LDVP, CLS-32L(DP), CLM-32L	BW3020	φ300×200mm	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	BW3030	φ300×300mm	¥20,000 (税込 ¥22,000)
CLG-40M(DVP), CLG-40L(DVP), CLS-40M(DP), CLS-40L(DP), CLM-40M, CLM-40L, RKZ-40II, MCS-40, MCS-40L	BW3815	φ380×150mm	¥24,000 (税込 ¥26,400)
	BW3820	φ380×200mm	¥25,000 (税込 ¥27,500)
	BW3830	φ380×300mm	¥28,000 (税込 ¥30,800)
	BW3840	φ380×400mm	¥32,000 (税込 ¥35,200)

## カゴ底収納皿

吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。標準付属の金網カゴに入れて使用します。

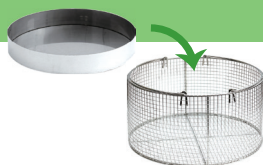

適合金網カゴ品番 ※上記金網カゴのサイズにより選択	品番	内寸法(直径×高さ)	定価
BW2120, BW2140	DH2036	φ203×60mm	¥8,000 (税込 ¥8,800)
BW2720, BW2730, BW2740	DH2676	φ267×60mm	¥8,000 (税込 ¥8,800)
BW3020, BW3030	DH2896	φ289×60mm	¥9,000 (税込 ¥9,900)
BW3815, BW3820, BW3830, BW3840	DH3636	φ363×60mm	¥10,000 (税込 ¥11,000)

## 滅菌容器

金網カゴではこぼれてしまう液体や土砂、廃棄物を直接投入する際に使用します。

- 卓上型のKTR-2322, TR-24Sは滅菌容器を使用すると容器内の空気が抜けにくく滅菌不良を引き起こします。滅菌容器の使用を前提とする場合は、縦長のKTR-2346, TR-24Lをご確認ください。
- 上下に重ねての使用はできません。下段容器内の空気が抜けず滅菌不良になります。



適合型式	品番	内寸法(直径×高さ)	定価
TR-24LA/B, KTR-2346A/B	VN2121	φ210×210mm	¥22,000 (税込 ¥24,200)
KTR-3045A/B, KTR-3065A/B, CLG-32L(DVP), CLS-32L(DP), CLM-32L	VN2727	φ270×270mm	¥30,000 (税込 ¥33,000)
CLG-40M(DVP), CLG-40L(DVP), CLS-40M(DP), CLS-40L(DP), CLM-40M, CLM-40L, MCS-40, MCS-40L	VN3630	φ360×300mm	¥40,000 (税込 ¥44,000)

上記オプションについては製品ご購入後も追加購入可能です。


## 品温センサー

液体等の滅菌物中心部または近傍の温度を確認することができます。また、品温運転モードにすることで、品温センサーによるタイマースタートが可能となり、より信頼性の高い滅菌が可能です。



★対象機種: CLM, CLG, CLSシリーズ  
(記録計に接続する場合は品温運転モードの対応は不可)

定価 ¥50,000 (税込 ¥55,000)

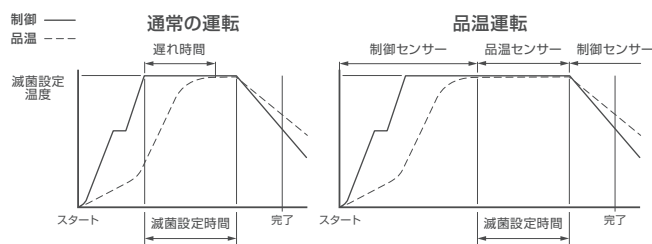

## プリンター



運転情報、工程遷移、エラー情報の他、制御温度、品温(※1)、圧力(※2)を一定間隔で印字します。


★対象機種: CLM(※3)、CLG、CLSシリーズ

- ※1 オプションの品温センサー装着時のみ
- ※2 CLG/CLG-DVPシリーズのみ
- ※3 CLMシリーズは運転開始日時、制御温度、品温(品温センサー装着時のみ)の表示となります。

定価 ¥120,000 (税込 ¥132,000)

## 強制冷却ファン

滅菌工程終了と同時に冷却ファンが作動し、運転完了(80℃)まで缶壁を送風冷却します。自然冷却に比べ、冷却行程が約60%短縮されます。(当社比/缶内無負荷状態)

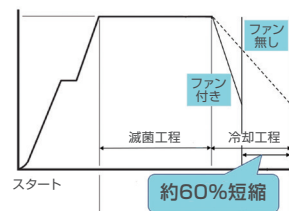

★対象機種: CLM, CLSシリーズ

定価 ¥20,000 (税込 ¥22,000)

定価 ¥25,000 (税込 ¥27,500) [40L系のみ]

## 記録計



温度センサー、圧力センサーと共に設置して缶内の温度・圧力を測定・記録できます。日々の運転記録に必要なGMP管理計測器です。チャート式、ペーパーレス式どちらも選択可能です。

★対象機種: 全シリーズ(CLAMシリーズを除く)

価格は記録計の機種・仕様によって異なりますのでご相談ください。

## 自動給水(プレヒート機能付)

わずらわしい運転ごとの水量確認・手動補給をなくし、スタート時水道栓から適正な水位に自動補給した後に運転を開始します。プレヒート機能は、滅菌物収納前に、設定温度にて予熱しておくことで運転時間の短縮が図れます。

★対象機種: CLM, CLG, CLSシリーズ

定価 ¥96,000 (税込 ¥105,600)

上記オプションについては製品ご注文時のみ承ります。