

高圧蒸気滅菌器 オプション

金網カゴ

蒸気が入り込みやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。



適合型式	品番	内寸法(直径×高さ)	定価(税込)
MCS-23、TR-24S、TR-24LA/B、KTR-2322、KTR-2346A/B	BW2120	φ210×200mm	¥14,300
MCS-23、TR-24LA/B、KTR-2346A/B	BW2140	φ210×400mm	¥17,600
KTR-3022、KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、MCS-30S、MCS-30L、MCS-3032S、MCS-3032L、RK-3030	BW2720	φ270×200mm	¥17,600
KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、MCS-30S、MCS-30L、MCS-3032S、MCS-3032L、RK-3030	BW2730	φ270×300mm	¥18,700
KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、MCS-30S、MCS-30L、MCS-3032S、MCS-3032L、RK-3030	BW2740	φ270×400mm	¥19,800
CLG-32L、CLG-32LDVP、CLS-32S(DP)、CLS-32L(DP)、CLM-32L	BW3020	φ300×200mm	¥18,700
CLG-32L、CLG-32LDVP、CLS-32S(DP)、CLS-32L(DP)、CLM-32L	BW3030	φ300×300mm	¥19,800
CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、RKZ-40II	BW3815	φ380×150mm	¥24,200
CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、RKZ-40II	BW3820	φ380×200mm	¥25,300
CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、RKZ-40II	BW3830	φ380×300mm	¥27,500
CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、RKZ-40II	BW3840	φ380×400mm	¥31,900

カゴ底収納皿

運転中に吹きこぼれた液体培地等を受ける役目を果たします。これにより缶底の汚れを抑えることができます。現在ご使用の標準金網カゴ内に入れて使用できます。



適合金網カゴ品番 ※上記金網カゴのサイズにより選択	品番	内寸法(直径×高さ)	定価(税込)
BW2120、BW2140	DH2036	φ203×60mm	¥7,700
BW2720、BW2730、BW2740	DH2676	φ267×60mm	¥8,250
BW3020、BW3030	DH2896	φ289×60mm	¥8,800
BW3815、BW3820、BW3830、BW3840	DH3636	φ363×60mm	¥9,900

滅菌容器

金網カゴではこぼれてしまう多量の液体や土砂の滅菌、廃棄用滅菌バッグを使用しない廃棄物滅菌などに使用します。

- KTR-2322/3022、TR-24S(卓上型)は缶体が浅くバケツ状の「滅菌容器」を使用すると容器内の空気が抜けず滅菌不良を引き起こします。滅菌容器の使用を前提とする場合は、縦長のKTR-2346/3045/3065、TR-24Lをご選んでください。
- 上下に重ねての使用はできません。下段容器内の空気が抜けず滅菌不良になる可能性があります。



適合型式	品番	内寸法(直径×高さ)	定価(税込)
MCS-23、TR-24LA/B、KTR-2346A/B	VN2121	φ210×210mm	¥22,000
MCS-30S、MCS-30L、KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、CLG-32L(DVP)、CLS-32S(DP)、CLS-32L(DP)、CLM-32L	VN2727	φ270×270mm	¥29,700
CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLM-40M、CLM-40L、CLS-40S(DP)、CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)	VN3630	φ360×300mm	¥39,600


上記オプションについては製品ご購入後も追加購入可能です。ご購入いただいた販売店へお問い合わせください。

品温センサー

液体等の滅菌物中心部または近傍の温度を確認することができます。また、品温運転モードにすることで、品温センサーによるタイマースタートが可能となり、より信頼性の高い滅菌が可能です。



★対象機種: CLM、CLG、CLSシリーズ
(記録計に接続する場合は品温運転モードの対応は不可)

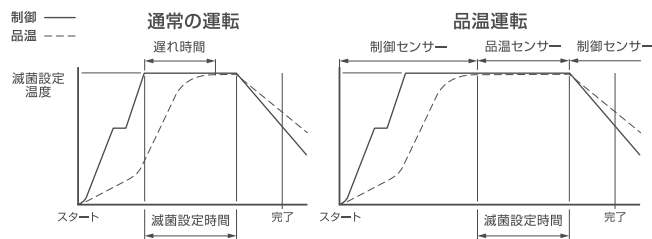

プリンター




運転開始時の日時を印字すると共に、制御温度、品温センサー(オプション)、圧力(CLGシリーズ)を一定間隔で印字します。

★対象機種: CLM、CLG、CLSシリーズ


強制冷却ファン

滅菌工程終了と同時に冷却ファンが作動し、運転完了(80℃)まで缶壁を送風冷却します。自然冷却に比べ、冷却行程が約60%短縮されます。(当社比/缶内無負荷状態)

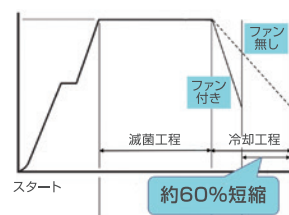

★対象機種: CLM、CLSシリーズ

記録計

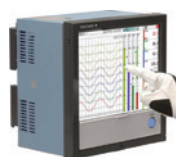

温度センサー、圧力センサーと共に設置して缶内の温度・圧力を測定・記録できます。日々の運転記録に必要なGMP管理計測器です。チャート式、ペーパレス式どちらも選択可能です。

★対象機種: 全シリーズ(CLMシリーズを除く)

自動給水(プレヒート機能付)

わずらわしい運転ごとの水量確認・手動補給をなくし、スタート時水道栓から適正な水位に自動補給した後に運転を開始します。プレヒート機能は、滅菌物収納前に、設定温度にて予熱しておくことで運転時間の短縮が図れます。

★対象機種: CLM、CLG、CLSシリーズ

電源仕様変更

建屋側の電源事情に合わせた変更も承ります。

★対象機種: 全シリーズに対応可能



上記オプションについては製品ご注文時のみ承ります。予めご了承ください。