

マイクレーブ

TRシリーズ

まいにち「簡単」いつでも「安心」
フタインターロック装置を始めとする安全機構を
搭載しながら低価格を実現させました

GMP/GLP 対応可能

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

ラボ用



TR-24S

TR-24LA/B

シングルモーション フタハンドル

フタの開閉～ロックまで片手操作できるため、一連の動作で滅菌物を収納/取り出しができます。

フタインターロック装置

フタハンドルを90度スライドするだけでロックが掛かります。また、缶内温度が80℃以下にならないとロックが解除できない安全構造です。

低床・省スペース設計

可能な限り作業面を低く、占有面積を小さくした卓上型と床置型の2種類から選択できます。

AC100Vの一般コンセント対応

アース付の一般コンセントで使え、水道につなぐ必要もないので使用場所を選びません。

安全装置

小さくても圧力容器。安全装置に妥協は許されません。フタインターロック装置の他に空焚、異常圧、やけどを防止する機能を標準装備しています。

◆シングルモーション フタハンドル




スタート時、フタ閉からロックまで片手で操作できるシングルモーション機構。ハンドルをLOCK側に回すだけでロックされます。ロック解除は解除可能温度(80℃以下)で「解除」キーを押すことにより可能です。

◆内蔵式排気ボトル(TR-24L)



排気時の蒸気をボトル内で冷却することで器外へ排出しません。また、内蔵式で前面操作のため扱い易く、ボトルの設置場所を設ける必要がありません。

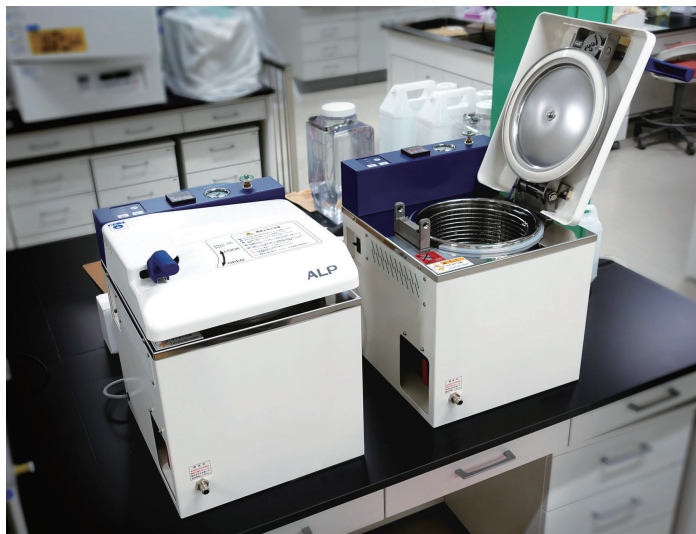

TR-24S 設置例

型 式	TR-24S	TR-24LA	TR-24LB
タ イ プ	卓上型	床置型	
缶内有効寸法/総容積	φ240×H220mm/12L	φ240×H450mm/22L	
外寸法 / 重量	W370×D430×H500mm/28kg	W370×D430×H800mm/36kg	
滅菌温度(最高圧力)	105℃~127℃(0.180MPa)		
滅 菌 時 間	1秒~99分59秒		
圧 力 容 器 種 別	簡易圧力容器		
安 全 装 置	フタインターロックシステム・空焚防止装置・過圧防止装置・圧力安全弁・安全ブレーカ		
必 要 な 電 源	AC100V,15A以上		
電 源 接 続 部 の 形 状	アース刃付プラグ Ⓢ		
金 網 カ ゴ / 個 数	φ210×200mm/1個	φ210×400mm/1個	φ210×200mm/2個
価 格	¥350,000 (税込 ¥385,000)	¥405,000 (税込 ¥445,500)	¥413,000 (税込 ¥454,300)